


### ETAPE 1 : Téléchargement de TeamViewer :

- Téléchargez [TeamViewer pour PC](http://www.topaze.org/teamviewer.exe)  
(<http://www.topaze.org/teamviewer.exe>)
- Enregistrez le fichier puis exécuter.  
(Ce programme permet à un technicien de Topaze d'intervenir en cas de problème. )

### ETAPE 2 : Téléchargement des fichiers de connexion :

- Allez sur notre site [www.topaze.com](http://www.topaze.com),
- Cliquez en haut à droite : « Espace utilisateurs Topaze » 
- Tapez dans les champs suivants votre numéro de client et de Topaze contact inscrits sur votre courrier :

×

## Espace utilisateurs Topaze

- Dans la fenêtre qui s'affiche, veuillez accéder au menu « Téléchargements » :



- Cliquez sur la rubrique « Téléchargements Bconnect » :

#### Téléchargements Bconnect

Téléchargements pour utilisateur PC

Téléchargements pour utilisateur MAC

- Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur la ligne intitulée « Télécharger le fichier d'installation Bconnect pour PC » et une fois téléchargée, exécutez le (*ou ouvrir*) afin que l'installation démarre et vous installe l'icône de lancement du logiciel Topaze Télévitale sur votre bureau.

## Téléchargements pour utilisateur PC

[Télécharger TeamViewer pour Windows](#)

Pour télécharger le fichier nécessaire à l'installation de Bconnect, cliquer sur le lien ci-dessous ... Lorsque la fenêtre de téléchargement s'affiche, sélectionner Exécuter (ou ouvrir) et suivre les indications d'installation. A la fin l'icône de lancement du logiciel s'affichera sur le bureau.


[Télécharger le fichier d'installation Bconnect pour PC](#)

- Fermez la fenêtre internet.

## ETAPE 3 : Branchement du lecteur de cartes SESAM Vitale

- Raccordez votre lecteur de Carte Vitale à votre ordinateur.
- Renseignez les informations demandées par votre lecteur lors de la mise sous tension (N°série/Date/Heure/Entête FSE)


## ETAPE 4 : Lancement de la connexion à Bconnect

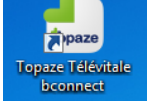- Ouvrir l'icône se trouvant sur votre bureau 
- Dans la fenêtre suivante, saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe (*Informations fournies dans notre courrier*)



The screenshot shows a window titled "Topaze Télévitale BConnect" with a 7% battery indicator. The window contains the logos for "topaze télévitale" and "bconnect" with an Apple logo. Below the logos are three input fields labeled "Login", "Mot de passe", and "Serveur". At the bottom center is a button labeled "Connexion".

- Une fenêtre d'alerte de sécurité s'affiche la première fois, cochez en bas à gauche la case : « Ne pas me redemander... » puis cliquez sur Connexion

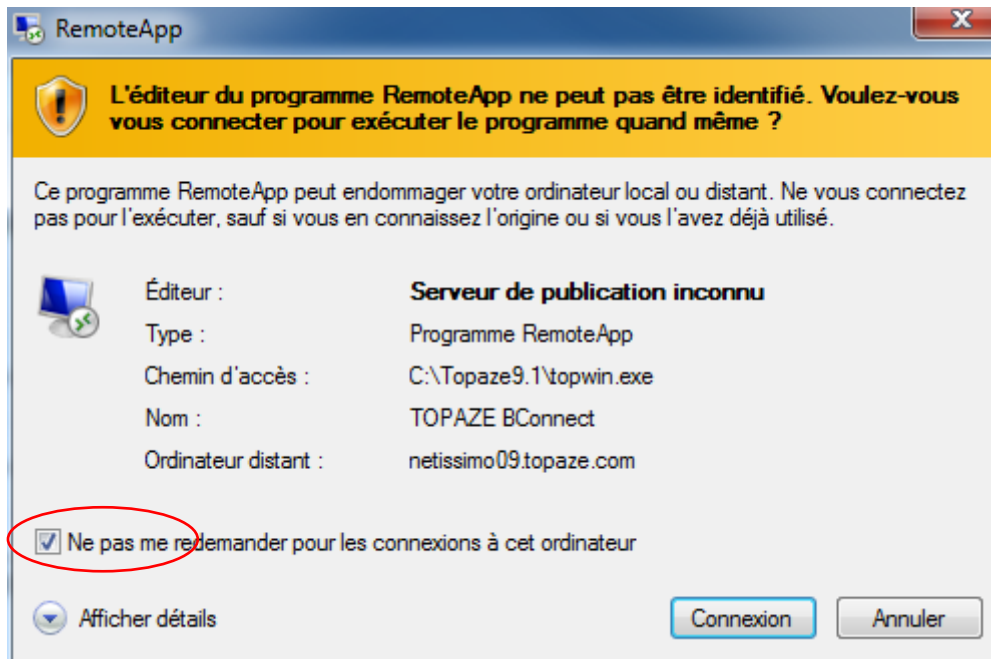

## ETAPE 5 : Détection de votre lecteur de cartes

- Si à l'ouverture du cabinet vous avez le message en rouge « Les lecteurs SESAM sont absents... », lancez l'outil de détection du lecteur :



- Cliquez sur le bouton "Déclencher la détection du lecteur"
- Quand le lecteur est trouvé, cliquez sur le bouton "Enregistrer" puis "Quitter"
- Avant de rentrer dans TOPAZE en cliquant sur le bouton « Valider », patientez quelques secondes, jusqu'à ce que le message "Les lecteurs SESAM sont présents ..." s'affiche.

Il ne vous reste plus qu'à valider l'ouverture du cabinet, pour information, *par défaut aucun mot de passe n'est nécessaire pour entrer dans votre logiciel.* Vous pourrez en définir un dans Topaze plus tard.

## ETAPE 6 : Paramétrage de TOPAZE Télévitalé

- Pour chaque TLA : Identifiez le lecteur ambulateur (module TLA puis bouton « Identification »)
- Paramétrez le serveur POP correspondant à la boîte aux lettres de télétransmission utilisée (Univers Paramétrage > Télétransmission > Connexion).
- Pour chaque praticien, synchronisez la CPS avec la fiche Praticien de TOPAZE (univers Fichiers >Praticiens puis bouton « Lecture carte » de la fiche Praticien et bouton « Mettre à jour »)
- Pour chaque praticien : Paramétrez la boîte aux lettres de télétransmission (bouton RSS de la fiche Praticien).
- Votre logiciel TOPAZE Télévitalé est prêt pour la télétransmission.