



# KAPELSE

Mise à jour du lecteur  
sur MAC



## PREREQUIS

Cette procédure vous permet de mettre à jour votre lecteur de carte vitale et de bénéficier des dernières évolutions du cahier des charges SESAM-VITALE Addendum 7.

La mise à jour consiste à copier un fichier ayant une extension « .kap » que vous trouverez dans la clé USB.

Ensuite, munissez-vous de votre lecteur et connectez-le à votre ordinateur.



# SUR L'ORDINATEUR



**1** Insérer la clé USB sur votre PC



**2** Branchez le lecteur et déchargez-le dans votre logiciel de facturation SESAM-Vitale

**3** Fermez ensuite votre logiciel de facturation

# SUR LE LECTEUR




4 En laissant le lecteur connecté à l'ordinateur, appuyer sur l'icône



5 Appuyez sur "Link"



6 Appuyez sur "MISE A JOUR LOGICIELLE"

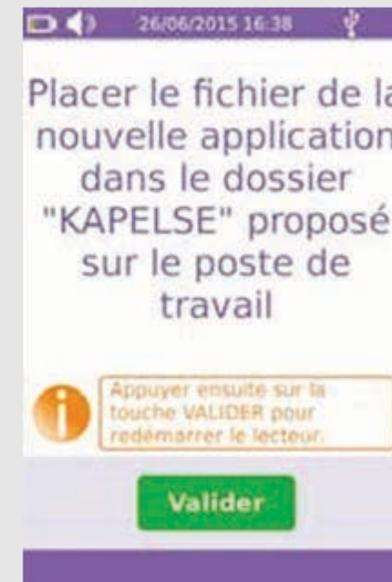

7 ATTENTION, ne cliquez pas tout de suite sur "Valider" et passez aux étapes suivantes


# SUR L'ORDINATEUR



**8** Ouvrir une nouvelle fenêtre de votre FINDER et cliquer sur le lecteur "KAPELSE" pour ouvrir son contenu.



**9** Copiez le fichier .kap que vous trouverez dans la clé USB que vous avez insérée puis collez-le dans le lecteur KAPELSE ouvert.

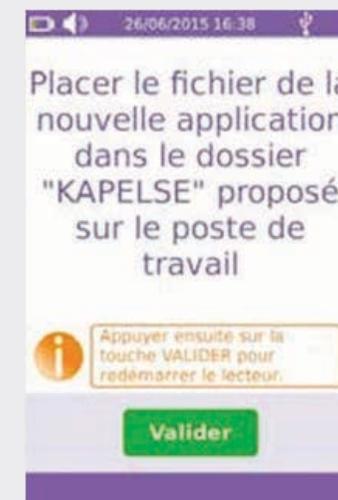

**10** Revenez sur l'écran du lecteur et cliquez sur "Valider". La mise à jour s'effectuera puis le lecteur redémarrera automatiquement pour appliquer la mise à jour.

Merci d'avoir suivi notre tutoriel

Si vous avez besoin d'aide, envoyez un email à :  
[support@topaze.com](mailto:support@topaze.com)

